

Low Vision サポートのすすめ

メガネで視力を正しく矯正しても字や物が見えずらく、さらに拡大して見たいときに活用していただきたいのが、ルーペなどの補助用具です。ロービジョンの方が積極的に自立した生活を実現できるよう、オグラは応援します。



オグラ眼鏡店

ロービジョンを正しく理解しましょう

ロービジョンの方が実際どんな場面で不自由さを感じているか、家族や周囲の人も実際に、あるいは一緒に理解を深めることが大切です。

ロービジョンの不便さは一人ひとり違います

人間の情報の約87%は眼から入り、見ることは「生活の質」につながっています。この大切な眼の機能が、病気やケガなどによって低下してしまった状態をロービジョン (Low Vision = 低視力) といいます。ロービジョンの方が、日常生活のどんな場面で“見る”ことに不便を感じているかは年齢や生活環境などによって個々に違います。たとえば、新聞が見えにくい、バスの行き先表示が見えない、テレビやワープ口の画面が見えにくい、といった具合です。また、ロービジョンの原因となる眼疾患によっても、見え方が様々に変わってきます。

補助用具で今の視力を最大限に活かしましょう

現代のリハビリテーション医学の考え方は、病気やケガにより失われた機能を、いろいろな道具を活かして補い、生き方の「質」の向上をめざす「プラス思考」。メガネで視力を正しく矯正しても字や物が見えにくい、といった場合にはルーペなどの補助用具を利用して、残っている視力の効率的使用をはかることが大切です。ロービジョン用具は、眼科専門医によって今の視力を最大限に活かせると診断された場合に処方されます。より良いロービジョン・ケアをはじめましょう。



補助用具の種類と選び方

補助用具は、一般的なルーペ(拡大鏡)をはじめロービジョン用に設計された弱視レンズや拡大読書器など種類もいろいろ。見たいもの、視力状態に合わせて正しく選びましょう。

選択ステップ

1. 使用目的を考えます

どんな時に使いたいのか、何を見たいかが、ルーペ選びの第1歩です。



- 本や新聞を読みたい
- 通帳を自分の眼で確かめたい
- 仕事の書類を読んだり、書き込みをしたい
- 両手を使って手工芸を楽しみたい

2. ルーペの倍率を決めます

メガネで矯正した上で決めるのが基本。使用目的を満たす最低倍率のルーペを選ぶことが、使い易さのコツです。



*たとえば、0.1の方が新聞を読むために必要な視力は

$$\text{必要倍率} = \frac{0.5(\text{必要視力})}{0.1(\text{矯正視力})} = 5(\text{倍})$$

低倍率

1.5倍から3倍くらい。両目での使用可能

読書や文献調べに使います。また、より広い範囲をカバーでき、ピント合わせ(ルーペの位置決め)も容易です。

高倍率

4倍から20倍くらい。片目で使用

倍率が高くなるほどルーペを目に近づけて使用します。そうしないとクリアな拡大像が得られません。

3. タイプを選びます

見たいものに合わせて 使い勝手のよいタイプを選びましょう。ルーペは用途によって何種類か使い分けが必要が必要です。

さらに、白けて見える、眩しいという方へは、フィルターレンズを併用することで、見え方の質が向上します。拡大読書器では白黒反転することも出来ます。



フィルターレンズ使用



白黒反転モード使用

眼疾患による見え方の一例

緑内障、黄斑部変性症、糖尿病網膜症、網膜色素変性症などの眼疾患により視力低下や視野欠損などの症状が現れる場合があります。それぞれの症状に合わせて適切なルーペや遮光眼鏡などの補装具、拡大読書器をお選び致します。



視力低下

ルーペや拡大読書器で拡大して文字を読みます



中心暗点

ルーペや拡大読書器で周辺視力を活かして文字を読みます




視野狭窄

単眼鏡を逆に見たり視野拡大レンズを使って視野を広げます



コントラスト低下

遮光眼鏡でコントラストを向上させます。文字はライト付きルーペを使います

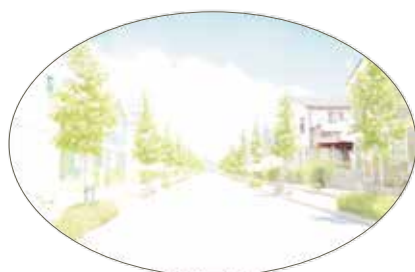

羞明(眩しさ)

遮光眼鏡や偏光レンズでまぶしさを軽減します



夜盲

遮光眼鏡で症状が緩和することもあります

※遮光眼鏡とはまぶしさやギラツキ、明るさをコントロールするカラーレンズのことです。

各種ルーペのご紹介

スタンダードタイプ

お手軽でも便利で高機能。シーンに合わせてお選びいただけます

手持ちタイプ



広視野ルーペ

5,610～12,100円

- 透明フレームで視野が広く取れます
- 裏返して、縦書きのものも読める両面使用
- グリップに高倍率小レンズ(5倍)付

角型 1.85×, 2×, 2.4× 丸型 1.9×, 2×, 2.3×, 3×



ブラックルーペ

6,930～12,760円

- ゆがみの少ない非球面レンズ
- 手にフィットしやすいグリップ
- 首から下げられるひも付

角型 2.8×, 3×, 3.5× 丸型 4×, 5×, 6×

置き型・両手が使えるタイプ



ラボクリップ レンズ1枚セット

8,800円

倍率の違うレンズ2枚セット

13,310円

- お手持ちのメガネにクリップを付けて使用します
- 読書や模型作りなど、両手を自由に使う作業に最適
- 軽いので長時間の使用にも適しています
- 通常ルーペより作業距離を長くとれます

両眼 1.7×, 2×, 2.5×, 3× 片眼 4×, 7×

※眼鏡は付属していません



ドームルーペ

サイズ(直径)

50mm / 5,500円


65mm / 6,600円

80mm / 7,700円

95mm / 9,900円

- 読みたいものの上に、乗せるだけ
- ピント合わせなしで簡単です
- 80mmは新聞の一段がそっくりおさまります

4×

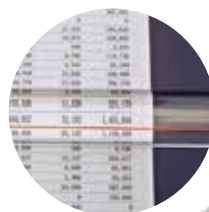

ボールルーペ

4,620～11,000円

- 縦書き横書きの文章を一行づつ確実に読むためにつくられたルーペ
- 文字を上下方向に拡大

1.8×, 2×

各種ルーペのご紹介

照明付きタイプ

LED照明で明るく、コントラストが高まり、より鮮明に拡大

手持ちタイプ



イージーポケット

8,250円

- わずか31g、持ち歩きに便利なカード型です
 - レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載
- 3×, 4×

置き型・両手が使えるタイプ



スクリボックス

14,520円

- レンズを覗きながら書き込みや作業ができます
 - LEDライトで鮮明に拡大します
 - 新聞や地図といった大きめの印刷物を見るのに最適です
- 2.8×



パワーラックス

22,990円

- 置いて使えて持ちやすいユニバーサルデザイン
 - LEDライトで鮮明に拡大します
 - ゆがみの少ない非球面レンズを採用
- 5×



LEDワイドライト

9,130～16,720円

- 見やすさに優れたライト付き
 - カバー付きなのでレンズを傷やほこりから守ります
 - ゆがみの少ない非球面レンズを採用
- 3×, 3.5×, 4×, 5×, 7×, 10×, 12.5×

拡大読書器・電子ルーペ・遮光眼鏡のご案内

視力障害が進んでいる方には、さらに適切なサポートをご用意

簡易型 電子ルーペ

3.8×～16×
クローバー 3

29,800円 (非課税)



- 手になじむコンパクトな電子ルーペ
見たいものに置いて簡単に拡大。かざしても見えます。

高性能 携帯型拡大読書器

7inch 2～22×
ヴィゾ・ルクス・デジタル HD

194,400円 (非課税)



- 携帯に便利で使いやすさにこだわった
7インチ拡大読書器
アンダーライン表示や、自動スクロールなど、
文字を読むために便利な機能を搭載。

高性能 携帯型拡大読書器

10inch 2.7～17×
クローバー 10

198,000円 (非課税)



- 10インチ大画面モニターの携帯型読書器
厚さ22mm、重量も710gと薄く軽量なので持ち運んで
外出先での使用も便利。スタンド(別売り)を使えば、
文字を書く時にも便利です。

据え置き型 拡大読書器

22inch 1.5～80×
クリアビュー C

226,000円 (非課税)



- 22型ワイド液晶モニターと最新
フルHDカメラによる鮮明な画像
分かりやすい大きなボタンで簡単に操作できます。

遮光眼鏡

ビューナル

10,000円 (非課税)



普段お使いの眼鏡の上からも掛けることができます。
軽く、しなやかで掛けやすくフィット感があります。

ヴェルジネ

20,000円 (非課税)



フレーム上部は厚みを持たせ、光を遮断。
サイドシールドで側面の視界も保ちます。サイズは2種類。

前掛け

【クリップオンタイプ】

レンズ込み
20,000円～ (非課税)



普段お使いの眼鏡の上に取り付けるだけ。
フレームの形状に合わせてカットすることもできます。

※フレームの形状に合わせてカットする場合、課税になります。

レチネックス グラス

15,000円 (非課税)



スポーツサングラスのようなスタイリッシュなデザインで
フィット感もあります。度付き対応も可能です。

その他多数の商品を取り揃えております

暗所視支援眼鏡

10/1^金
取り扱い
開始

HOYA MW10 HiKARI (ひかり) 2021モデル ViXion 395,000円

人間工学に基づくデザイン設計でリニューアル新登場



人間工学に基づいた重量バランス設計により、快適な装用感を実現。
(ヘッドマウントとコードを改良しました。**見え方は変わりません**)



より顔にフィットするカーブ、カメラの凸部が目立たないシームレスなフォルム、
遮光性に優れたシールドスクリーンを採用。



肌感で上下位置がわかる



収納もコンパクト



2021モデル



併売モデル

暗所視支援眼鏡

10/1^金
取り扱い
開始




HOYA MW10 HiKARI (ひかり) 2021モデル

昼間・夜間問わず、「暗所」での見え方にお困りの方へ。



一般の暗視カメラとは異なり、**画像はカラー**。
ロービジョン患者様専用設計です。
(0.6lxの光を増幅して、カラーでも再現)
ハイコントラスト、白黒反転も選択可能。

ディスプレイは安全性に配慮して
左右に配し、さらに前方が透けて
見えるシースルー構造。

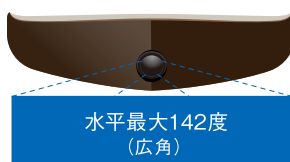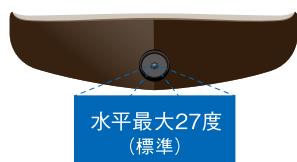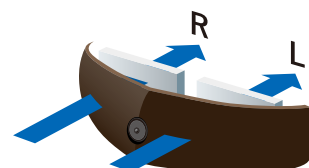

カメラレンズは2種類。
(標準・広角)
視野狭窄にも対応。



視力矯正が必要な方には
インナーレンズをご用意。(別途オプション)

有効性について

当製品は夜盲症の方向けの暗所視支援眼鏡です。

1) 両眼の矯正視力が0.1以上 2) 中心視野が残存されていること

購入にあたっては、眼科医療施設で眼科専門医にご相談ください。

「日常生活用具」補助対象の地区があります

最新情報はViXion 公式サイトをご参照ください。

【商品に関するお問い合わせは】

〈販売元〉 **オグラ眼鏡店** 営業統括本部担当：畑野

Tel. **03-3288-2230** FAX. **03-3263-5337**

店舗紹介



ロービジョンセンター 市ヶ谷

Tel. **03-6272-5379**

JR市ヶ谷駅3分 靖国通り 地下鉄A3番出口

営業時間 9:30～18:00 定休日 日曜・祝日

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13 市ヶ谷安田ビル1階

ロービジョンコーナー 渋谷

Tel. **03-3499-6231**

JR渋谷駅東口 地下鉄B2出口

明治通り東急REIホテル(旧東急イン)並び

営業時間 10:00～18:30

〒150-0002 東京都渋谷区 渋谷1-24-2 朱ビル1、2階



こどもメガネアンファン 大丸梅田店

Tel. **06-4796-7744**

JR大阪駅より徒歩1分 大丸大阪梅田店 10F

営業時間 10:00～20:00 (19時 最終受付) 定休日 無し

〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸大阪梅田店10F



八王子店
Tel.042-646-5515
JR八王子駅北口 JTB前



相模大野ステーションスクエア店
Tel.042-767-1696
相模大野駅ステーションスクエアA館6階



湘南藤沢オーバ店
Tel.0466-26-2877
JR藤沢駅南口 オーバ3階



横浜東口ポルタ店
Tel.045-453-6501
地下街ポルタ



イトーヨーカドー亀有駅前店
Tel.03-5680-5701
イトーヨーカドー亀有駅前店6階



高崎店
Tel.027-323-8629
JR高崎駅 西口前



うつのみや表参道スクエア店
Tel.028-624-9926
馬場通り バルコ向かい

大丸東京店メガネサロン	Tel.03-6895-2638	【直通】 JR東京駅大丸東京店 10階 メガネ
新宿ルミネエスト店	Tel.03-3352-6531	JR新宿駅東口 ルミネエスト 5階
松坂屋上野店	Tel.03-5816-0282	【直通】 松坂屋上野店本館 7階 メガネサロン
コピス吉祥寺店	Tel.0422-23-6750	吉祥寺駅北口 徒歩2分 コピス吉祥寺B館 3階
町田東急ツインズ店	Tel.042-739-3631	町田東急ツインズウエスト 4階
新百合ヶ丘エルミロード店	Tel.044-965-3020	小田急線新百合ヶ丘駅南口 エルミロード 4階
青葉台東急スクエア店	Tel.045-985-8020	【直通】 青葉台東急スクエア South-1 本館 3階
京急百貨店メガネサロン	Tel.045-848-7278	【直通】 京浜急行上大岡駅 京急百貨店 7階 メガネサロン
シャポー市川店	Tel.047-303-3028	JR市川駅北口 シャポー市川 B1階
静岡伊勢丹店	Tel.054-253-1813	【直通】 静岡伊勢丹 4階 メガネサロン



大丸東京店メガネサロン



新宿ルミネエスト店

横浜西口ジョイナス店	Tel.045-321-6871	セレオ八王子店	Tel.042-686-3387
アトレ川崎店	Tel.044-200-6654	北千住マルイ店	Tel.03-6806-2891

こどもメガネアンファン・こどもメガネアンファン+ファミリー

小田急新宿店	Tel.03-5325-2507	伊勢丹立川店	Tel.042-540-7611
横浜高島屋店	Tel.045-290-7211	玉川高島屋店	Tel.03-5717-6681
東武百貨店池袋店	Tel.03-5957-7680	渋谷・東急本店	Tel.03-3477-3604
高島屋大阪店	Tel.06-6632-9229	柏高島屋店	Tel.04-7141-6788
伊勢丹浦和店	Tel.048-824-8381		

SPECS

新宿三丁目店	Tel.03-6380-5249	コピス吉祥寺店	Tel.0422-27-2836
パルコヤ上野店	Tel.03-6284-2871	【直通】	

詳しくは店舗へお問い合わせください